

Flowflex™


SARS-CoV-2-

Antigen-Schnelltest (Selbsttest)



Ein Schnelltest für den Nachweis von SARS-CoV-2-Nukleokapsid-Antigenen in anterioren Nasenabstrichproben.

Nur zur In-Vitro-Diagnostik. Zum Selbsttest.

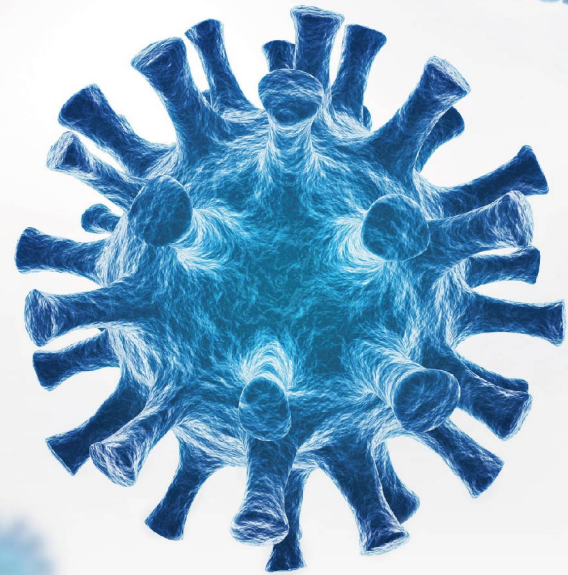

Der Weltmarktführer für Schnelltests mit **26** Jahren Erfahrung.



Schnell



Genauig



Benutzerfreundlich



Zuverlässig



CE-Zertifiziert

ACON®

Flowflex SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest(Selbsttest)

Beim SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest handelt es sich um ein Lateral-Flow-Test (Seitlicher Durchfluss-Test) für den qualitativen Nachweis des Nukleokapsid-Antigens des SARS-CoV-2 in vorherigen Nasenabstrichproben, direkt bei Personen mit Verdacht auf COVID-19 innerhalb der ersten sieben Tage nach Auftreten der Symptome. Der Test kann auch Proben von Personen ohne Symptome untersuchen.

- **Probe:** Anterioren Nasenabstrichproben
- **Testzeit:** Testergebnisse in 15 Minuten
- **Haltbarkeit:** 24 Monate
- **Lagertemperatur:** 2-30 °C
- **Genauigkeit:** 98,8%
- **Sensitivität:** 97,1%
- **Spezifität:** 99,5%



1T



5T



25T

Testverfahren


1. Test-Vorbereitung

A. Öffnen Sie das Testkit:




B. Sie sollten haben:

Hinweis: Bei 1 Test- und 5 Testprodukten befindet sich das Loch in der Kit-Box.

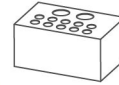

Röhrchenhalter
(Nur für 25 Testprodukte)

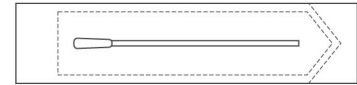

Einwegtupfer



Testkassette



Extraktionspufferröhrchen



Gebrauchsanweisung



Abfallbeutel


C. Waschen oder desinfizieren Sie Ihre Hände.



D. Lesen Sie die Anleitung.




E. Überprüfen Sie das Ablaufdatum.

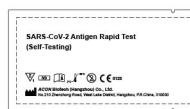

F. Öffnen Sie den Beutel.



G. Überprüfen Sie die Kassette.

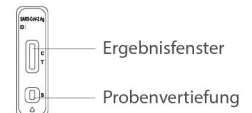


2. Probenentnahme

MEDIZINISCHE PROFESSIONELLE ENTNEHMEN


SELBST ENTNEHMEN




oder

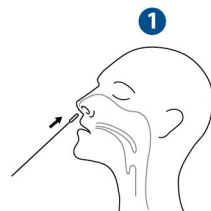


Führen Sie die gesamte saugfähige Spitze des Tupfers in ein Nasenloch ein. Drücken Sie den Tupfer mit einer sanften Drehbewegung weniger als 2,5 cm vom Rand des Nasenlochs entfernt.

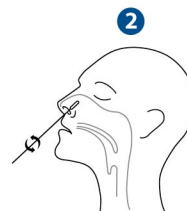

Drehen Sie den Tupfer 5 Mal und streichen Sie dabei über die Innenseite des Nasenlochs.

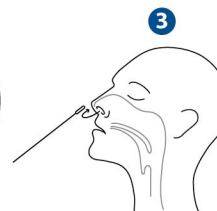


Entfernen Sie den Tupfer und führen Sie ihn in das andere Nasenloch ein.

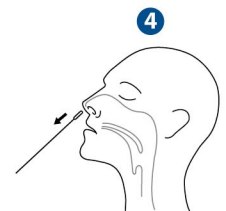


Entfernen Sie den Tupfer aus dem Nasenloch.


3. Probenvorbereitung

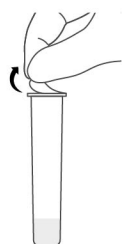


Entfernen Sie die Aluminiumfolie.

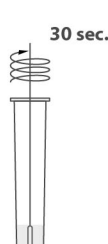

Führen Sie den Tupfer in das Röhrchen ein und schwenken Sie ihn für 30 Sekunden.

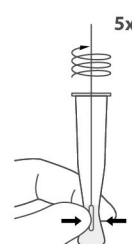


Drehen Sie den Tupfer 5 Mal, während Sie die Seite des Röhrchens zusammendrücken.

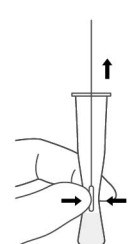

Entfernen Sie den Tupfer, während Sie das Röhrchen zusammendrücken.

4. Test durchführen

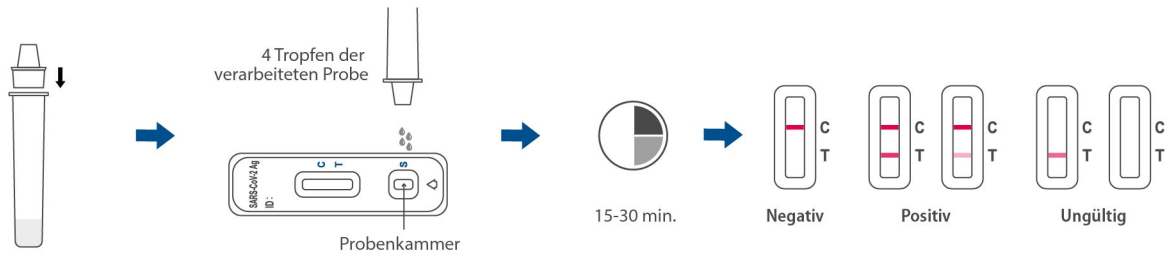

Bestellangaben

Produktname	Katalognummer	Format	Probe	Packung
Flowflex SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Selbsttest)	L031-118M5 ✓	Kassette	Anterioren Nasenabstrichproben	1 Test/Kit
	L031-118P5 ✓	Kassette	Anterioren Nasenabstrichproben	5 Tests/Kit
	L031-118R5 ✓	Kassette	Anterioren Nasenabstrichproben	25 Tests/Kit

✓ CE-Zertifiziert



ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
 No.210 Zhenzhong Road, West Lake District, Hangzhou, P.R.China, 310030
 Tel: +86-571-8118 9706 / Fax: +86-571-8777 5781 / Email: information@aconlab.com.cn
www.aconbio.com